

PERICARE PCSD-01

赤外線治療器<ペリケア PCSD-01>




**温熱効果で
体の芯までじんわりあたたか**

広範囲の赤外線ヒータで患部を広く温め、身体に温熱効果を与えます。
シンプルな操作性とアームによる広い可動域、そして置く場所を選ばないスマートな形状で
使いやすい赤外線治療器です。


見やすい画面で操作も簡単。 使う人のことを考えた設計。

見やすいインターフェース —

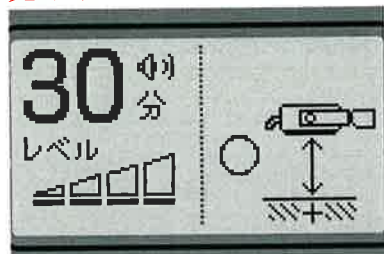

必要な情報をシンプルにわかりやすく表示しているので、機器の情報を瞬時に把握できます。

一目でわかる距離表示 —

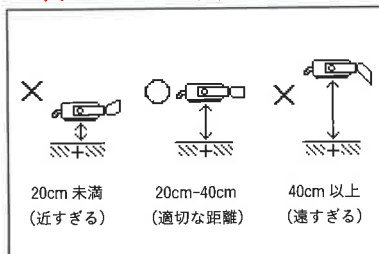

目視だけではわかりづらいヒータと患部間の距離をイラストで表示。常に適切な距離を保って治療が行えます。

広いヒータ面積 —



幅約340mm×高さ約190mmの広範囲の赤外線ヒータで患部を広く温めることができます。

設置場所を選ばない形状 —



設置場所を選ばないスマートな形状。ベッド下のスペースを活用できるので狭い病室でも設置に困りません。

2ヶ所で操作できるオートスイッチ —



オートスイッチがベースユニットとヒータユニットのどちらにも搭載されているため、どちらからでも全自動機能※の開始/停止を行うことができます。

※前もって設定した「タイマー時間」と「強度レベル」で出力する機能です。



■本体仕様

販売名	ペリケア PCSD-01
医療機器認証番号	302ALBZX00004000
一般的名称	赤外線治療器
JMDNコード	35147000
医療機器の分類	特定保守管理医療機器
電撃に対する保護の形式	クラスI
定格電圧および周波数	AV100V 50/60Hz
電源入力	330VA
タイマー	10分±1%~30分±1%


■レーザ仕様

レーザクラス	クラス3R
波長	650nm
出力	5mW

■寸法・重量

寸法(※最大時)	460W×1250D×1410H(mm)
重量	27.0kg

※仕様及び規格は、お断りなしに変更することがあります。
※製品の色はカタログの色と異なる場合があります。

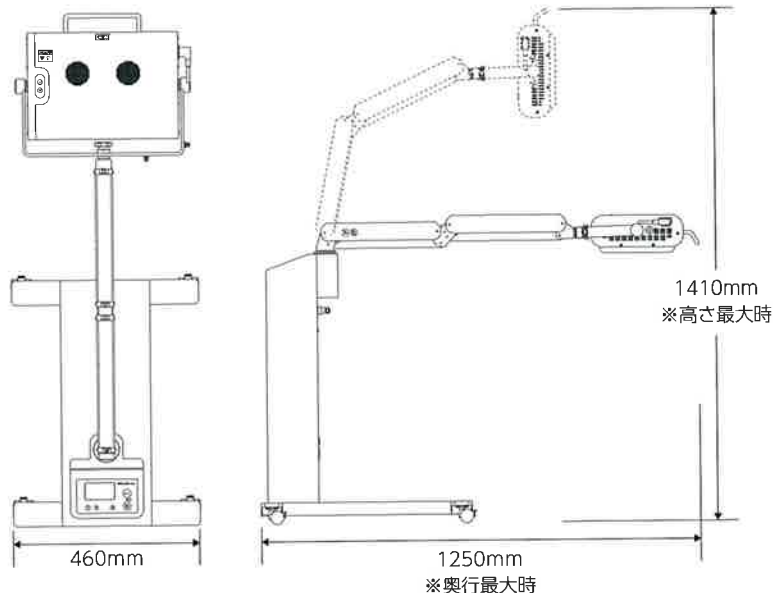

■販売元

株式会社 バイタル

TEL: 03-3458-1261

FAX: 03-3458-1263

〒140-0002 東京都品川区東品川1丁目2番5号リバーサイド品川港南ビル6階

■製造販売業者・製造業者



株式会社テクノリンク <https://techno-link.co.jp>

本社 〒956-0804 新潟県新潟市秋葉区荻島2-30-15 TEL0250-21-6251 FAX0250-24-2151



本社・本社工場認証取得

■販売業者

医療従事者、販売代理店向け資料

※本誌の一部または全部を無断で複製複製することは著作権(著作権法第21条)の侵害にあたります。
また、それらをインターネットなどで公開することも公衆送信権(著作権法第23条)の侵害にあたります。

T-P-87PRCR-CA2306-002