

止血用絆創膏 Alginate Pad




「アルギン酸カルシウム」を使用した
止血効果のある絆創膏です

- アルギン酸カルシウムを含む不織布が素早く止血
- 粘着テープはかぶれにくく、肌に優しい素材
- 清潔・確実に穿刺部に貼付


アルギネートパッドの止血機序

1

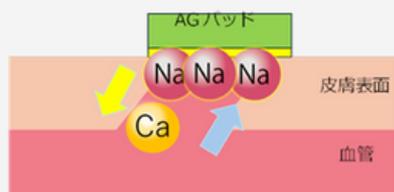

アルギン酸カルシウムが血中のナトリウムイオンとイオン交換し、ナトリウムイオンによりゲル化

2

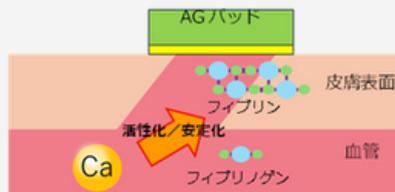

血中のカルシウムイオンが血液凝固因子IVとして活性化し、血液凝固作用する



出血部にアルギネートパッドを貼付10分後、表面のゲル化によりかさぶたがなく、サラサラの状態に

粘着テープのかぶれにくさ



アルギネートパッド（写真左：白）と接着テープ改良前（写真左：透明）を3日間貼り続け、皮膚のかぶれを比較。粘着剤が「かぶれがしにくい素材」を採用していることにより、写真右のように、3日後でもかぶれは見受けられなかった。

- ・名称：アルギネートパット[®]
- ・一般医療機器 救急絆創膏（医療用品04）
- ・JMDNコード：34864000
- ・JANコード：4562109250091
- ・医療機器届出番号：25B3X00009000039



- ・製品仕様
- ・サイズ：40mm×36mm
- ・パッド部：アルギン酸不織布
- ・粘着テープ部：ポリエステル不織布
- ・禁忌・禁止：再使用禁止
- ・滅菌方法：EOG滅菌
- ・滅菌期限：5年間

品番：25009 200枚入／箱
25015 30枚入／箱

診療の止血時間短縮に

- 透析後の止血困難者に
- 心カテ術後やAライン抜去後の穿刺部止血に
- シャントPTA術後、日帰り手術の穿刺部止血に



←アルギネートパッドの使用方法は
こちらのQRコードをご覧ください。

VITALカラー止血バンド 8 Colors



ほつれにくい特殊生地「オリタッチ」を使用することにより
毛羽立ちにくく、接着力が長持ち

用途に合わせて製品の色を全8色用意しました。



サイズ S (3×25cm)、M (3×25cm)、L (3×35cm)

VITAL
株式会社バイタル

〒140-0002
東京都品川区東品川1-2-5リバーサイド品川港南ビル6階
TEL：03-3458-1261
サイト：www.vital-j.co.jp